


IB/04/03876

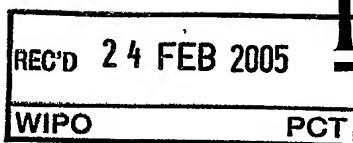

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 21 JAN. 2005

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75900 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*04

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87

0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 191203

REMISE DES PIÈCES

DATE

7 SEPT 2004

LIEU

75 INPI PARIS 34 SP

N° D'ENREGISTREMENT

0409443 ✓

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

- 7 SEP. 2004 ✓

Vos références pour ce dossier

(facultatif) 241545 D22483 EMP

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet REGIMBEAU
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie**2** NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de

☐

brevet européen Demande de brevet initiale

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PIPETTE COMPORTANT UNE ROUE DE COMMANDE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»**5** DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)☒ Personne morale☐ Personne physiqueNom
ou dénomination sociale

GILSON S.A.S

Prénoms

Forme juridique

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

N° SIREN

72820204500064

Code APE-NAF

Domicile

Rue

19, avenue des Entrepreneurs, 95400 VILLIERS LE BEL, FRANCE

ou
siège

Code postal et ville

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»Remplir impérativement la 2^{ème} page

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
 page 2/2

BR2

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

7 SEPT 2004

LIEU

75 INPI PARIS 34 SP

N° D'ENREGISTREMENT

0409443

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 191203

5 MANDATAIRE (s'il y a lieu)

-241545-D22483EMP

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet REGIMBEAU

Nationalité

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

Adresse

Rue

20, rue de Chazelles

Code postal et ville

75847 PARIS CEDEX 17

Pays

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

01 44 29 35 00

01 44 29 35 99

info@regimbeau.fr

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques

Les demandeurs et les inventeurs
sont les mêmes personnes☐ Oui☒ Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé☒☐

Choix à faire obligatoirement au dépôt (cf. Notice explicative Rubrique 8)

**9 RÉDUCTION DU TAUX
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques


☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la
décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG
**10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES
ET/OU D'ACIDES AMINÉS**
☐ Cochez la case si la description contient une liste de séquences


Le support électronique de données est joint

☐La déclaration de conformité de la liste de
séquences sur support papier avec le
support électronique de données est jointe☐Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,
indiquez le nombre de pages jointes

1

**11 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE**
 (Nom et qualité du signataire)

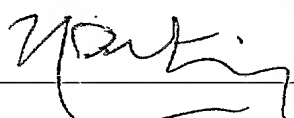
 32469

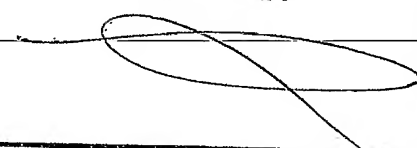**VISA DE LA PRÉFECTURE
OU DE L'INPI**


L'invention concerne les pipettes.

Il est connu de prévoir sur les pipettes motorisées ou les pipettes à actionnement manuel des organes de commande de la pipette sous la forme de boutons, roues, molettes, etc. Le document WO 01/67748 au nom de la demanderesse divulgue par exemple une pipette à actionnement manuel comprenant une molette de réglage mobile à rotation dans le corps de la pipette pour régler le volume de liquide à prélever. Cette molette est par ailleurs mobile à coulissement suivant une direction perpendiculaire à l'axe de rotation pour faire passer la molette d'une position verrouillée à une position déverrouillée. En position verrouillée, la rotation de la molette, par exemple accidentelle ou intempestive, n'entraîne pas de dérèglage du volume.

Un but de l'invention est de fournir une pipette ayant une ergonomie encore améliorée.

A cet effet, on prévoit sur l'invention une pipette comportant une roue de commande mobile à rotation et mobile à coulissement, la pipette étant agencée de sorte d'un coulissement de la roue engendre une commande de la pipette.

La pipette selon l'invention pourra présenter en outre au moins l'une quelconque des caractéristiques suivantes :

- la roue s'étend en saillie d'un corps de la pipette,
- la pipette comprend des moyens de rappel de la roue à l'encontre de son coulissement à partir d'une position nominale,
- elle comprend des moyens pour convertir un mouvement de la roue en au moins un signal électrique,
- elle comprend des moyens pour convertir un mouvement de la roue en au moins deux signaux électriques permettant de déterminer un sens du mouvement,
- elle est agencée pour permettre une navigation au moyen de la roue dans au moins un menu,

- elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue au moins un paramètre, et de préférence au moins deux paramètres,

- elle comprend des moyens pour déterminer une vitesse de rotation de la roue et des moyens pour choisir une correspondance entre un secteur angulaire de la roue et une unité de valeur d'un paramètre,

- elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue au moins un volume à prélever,

- elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue au moins une valeur de calibration de la pipette,

- elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue un nombre de cycles de prélèvement précédant l'émission d'un signal par la pipette, et

- elle est agencée pour permettre d'entrer dans la pipette au moyen de la roue des mots, des chiffres, ou des expressions alphanumériques.

On prévoit également selon l'invention un procédé de commande d'une pipette, dans lequel on commande la pipette en faisant coulisser une roue mobile à rotation.

Le procédé selon l'invention pourra présenter en outre au moins l'une quelconque des caractéristiques suivantes :

- on fait coulisser la roue pour activer un mode de réglage d'un paramètre,

- on fait tourner la roue pour sélectionner une valeur d'un paramètre,

- on fait coulisser la roue pour valider une valeur d'un paramètre sélectionné,

- durant une manœuvre de la roue, on détermine une vitesse de rotation de la roue ; et on choisit une correspondance entre un secteur angulaire de la roue et une unité de valeur du paramètre.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description suivante d'un mode préféré de réalisation et d'une

variante donnés à titre d'exemples non limitatifs en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'une pipette selon un mode préféré de réalisation de l'invention ;
- 5 - les figures 2 et 3 sont deux vues en coupe axiale de la pipette de la figure 1 illustrant respectivement ses parties haute et basse ;
- la figure 4 est une vue en perspective éclatée de la partie haute de la pipette de la figure 1 ;
- la figure 5 est une vue à plus grande échelle d'un détail de la figure 10 1 ;
- la figure 6 est une vue en perspective éclatée de la partie haute de la pipette illustrée à la figure 5 ;
- la figure 7 est une vue schématique illustrant le montage de la molette de la pipette de la figure 1 ;
- 15 - la figure 8 illustre l'encodage de signaux résultant du mouvement de la molette ;
- la figure 9 est constituée de deux tableaux montrant l'analyse des signaux de la figure 8 ; et
- la figure 10 est une vue en perspective d'une variante de réalisation 20 de la pipette.

On a illustré aux figures 1 à 9 un mode préféré de réalisation de la pipette selon l'invention.

La pipette 2 comprend un corps ou châssis 4. Il s'agit en l'espèce d'une pipette motorisée de sorte que le prélèvement et le refoulement du liquide est
25 effectué sous l'action d'un moteur.

Comme illustré aux figures 2 et 3, la pipette comprend un moteur 6 comprenant un boîtier 8 et une tige 10 s'étendant suivant un axe longitudinal 12 de la pipette. Le moteur est apte à faire coulisser la tige 10 vers le haut ou vers le bas suivant la direction 12.

30 A une extrémité inférieure de la tige 10 est fixée une pièce de prolongation ou touche 14, qui est en l'espèce vissée sur l'extrémité de la

tige. La touche est en appui suivant l'axe 12 sur un insert 20 logé dans une extrémité supérieure d'un support de piston 22. Ce dernier reçoit dans une extrémité inférieure un piston 24. L'ensemble formé par la tige 10, la touche 14, l'insert 20, le support de piston 22 et le piston 24 forme un équipage mobile à coulissement suivant la direction 12.

La pipette comprend un ressort 36 dont une extrémité supérieure est en appui contre une extrémité supérieure du support de piston 22 et une extrémité inférieure est en appui sur le corps 4 de façon à solliciter le support 22 ainsi que le piston 24 vers le haut et maintenir l'insert 20 en contact avec la touche 14.

Lorsque le ressort commande la descente de la tige 10, l'appui de la touche 14 sur l'insert 20 provoque la descente du piston le long de l'axe 12. Lorsque le moteur fait remonter la tige 10, le piston suit le mouvement inverse sous l'effet de rappel du ressort 36.

La pipette comprend un embout inférieur en deux portions, respectivement une portion supérieure 26 et une portion inférieure 28. La portion inférieure 28 est rapportée par vissage dans la portion supérieure 26 avec l'interposition d'un joint d'étanchéité en contact avec la face cylindrique externe du piston. A une extrémité inférieure de la portion 28 peut être fixé un cône jetable destiné à recevoir le liquide à prélever. La pipette comprend un bras 32 permettant d'éjecter le cône lorsque celui-ci doit être remplacé par un cône propre. Le bras 32 est commandé par l'utilisateur au moyen d'un bouton 34 fixé au corps 4.

Comme on le voit notamment sur la figure 5, le corps 4 comprend notamment une demi-coque avant 40 et une demi-coque arrière 42 formant un boîtier de réception des organes dans la partie haute de la pipette. Cette partie a été illustrée à la figure 2 et comprend en particulier le moteur avec la tige. La partie basse de la pipette (illustrée ainsi que le moteur et d'autres pièces à la figure 3) est amovible et peut être démontée de la partie haute pour associer à cette dernière une partie basse différente, par exemple présentant un volume de prélèvement de capacité différente. Pour cela, le

corps 4 comprend un fourreau 44 présentant à son extrémité inférieure un filet pour la réception par vissage d'un écrou 46 permettant le maintien de la partie basse par l'intermédiaire de la portion haute 26 de l'embout.

La pipette comprend une unité de commande électronique 50 sous la forme d'une carte électronique comprenant notamment un microprocesseur et un écran 52 visible à travers une fenêtre 54 de la demi-coque supérieure 40. La pipette comprend une batterie 56 pour l'alimentation en énergie de la carte 50 et du moteur 6.

La pipette comprend différents organes de commande permettant à l'utilisateur de commander le fonctionnement de la pipette, comme on le verra plus loin. Ces organes comprennent notamment une roue 60 sous la forme d'une molette, ainsi que des boutons 62, 64, 66, 68, ces cinq boutons s'étendant sur la face avant de la demi-coque avant. La molette comprend également deux boutons latéraux 70, 71. Ces boutons s'étendent à la jonction des coques avant et arrière.

La roue 60 a été illustrée en vue éclatée sur la figure 6. Elle comprend une bague 72 en élastomère rapportée sur un support 74 monté sur un disque rotatif 76, lui-même reçu sur une carte 78. Comme illustré de façon schématique à la figure 7, la molette 60 est montée sur la carte 78 de façon à être mobile à rotation autour d'un axe 80 parallèle au plan de la fenêtre 54 et formant un angle aigu avec l'axe 32 qu'il intercepte. La molette 60 est également montée mobile à coulissement par rapport à la carte 78 suivant une direction 82 perpendiculaire à l'axe 80 et au plan général de la fenêtre 54.

La molette 60 est positionnée dans la partie haute de sorte qu'elle s'étend partiellement en saillie radiale d'une ouverture 84 formée dans la coque sous la fenêtre 54. Cet agencement permet à l'utilisateur de manœuvrer la molette aussi bien à coulissement que à rotation directement depuis l'extérieur de la pipette. La roue 76 constitue une roue codeuse portant une photodiode. A la carte 78 est fixé un photodétecteur apte à détecter les mouvements à coulissement et à rotation de la roue et à les

transmettre à la carte 50. La molette 60 et la carte 78 sont agencées de sorte que la rotation de la molette est apte à générer simultanément deux signaux identiques en crénaux, mais en décalage de phase d'un quart de période l'un par rapport à l'autre comme illustré à la figure 8. Chaque signal se compose au cours d'une période d'une succession de deux 1 puis de deux 0. Comme illustré dans les tableaux de la figure 9, ce décalage des signaux permet à la carte 50 de déterminer à partir d'une position de départ quelconque de la molette son sens de rotation par analyse de chaque signal à partir de cette position.

10 La carte 78 détecte également un mouvement de coulisement de la molette produit par l'utilisateur. Ce coulisement tend à enfoncer la molette à l'intérieur de la partie haute, la molette étant immédiatement rappelée dans sa position d'origine par un ressort de rappel 90. Ce coulisement suivi immédiatement d'un coulisement en sens inverse constitue une impulsion ou un clic.

15 La pipette a été préprogrammée pour remplir un certain nombre de fonctions. Parmi celles-ci, certaines font intervenir les boutons précités ainsi que la molette 60.

20 De façon générale, l'utilisateur peut commander la pipette d'une part par un clic engendrant le coulisement de la molette, et d'autre part par une mise en rotation de la molette antérieure ou postérieure au clic. La molette permet notamment la navigation dans des menus du logiciel apparaissant sur l'écran 52. Elle permet également de régler les valeurs de différents paramètres comme on va le voir.

25 La pipette est programmée pour mesurer une vitesse de rotation de la molette lorsque celle-ci est manœuvrée par l'utilisateur. Précisément, la molette comprend un nombre prédéterminé de pas qui correspondent chacun à une mesure angulaire d'une fraction de la molette. Le franchissement de chacun de ces pas est ressenti par l'utilisateur lors de la rotation de la molette. Un tel agencement est classique dans une roue de commande. Lors de la rotation de la molette, le processeur mesure la

30

période de temps s'écoulant entre deux pas successifs. En fonction de cette mesure, la correspondance entre un pas de la molette et le nombre d'incréments du paramètre dont la valeur est modifiée par le mouvement de la molette est éventuellement changée.

5 Dans le présent exemple, si la période est inférieure à 15 millisecondes, le processeur décidera qu'un pas correspond à cent incréments. Si la période est comprise entre 15 et 25 millisecondes, le processeur décidera qu'un pas correspond à dix incréments. Enfin, si cette période est supérieure à 25 millisecondes, un pas correspondra à un incrément. Par conséquent, le

10 processeur adapte la vitesse de défilement du paramètre en fonction de la vitesse de rotation de la molette par l'utilisateur. En d'autres termes, si la molette est manœuvrée très rapidement en rotation, le processeur commandera une variation du paramètre particulièrement rapide. A l'inverse, si la rotation de la molette est lente, le processeur commandera une variation

15 du paramètre particulièrement lente. On a présenté dans le présent exemple trois valeurs d'incréments associés à deux valeurs de seuil. Il va de soi que le nombre d'incréments et de seuils peut être modifié. On pourra par exemple se contenter d'une seule valeur de seuil. De même, la valeur des seuils des incréments pourra elle aussi être modifiée.

20 Nous allons maintenant décrire les manœuvres effectuées par l'utilisateur pour effectuer certaines commandes de la pipette. La pipette est programmée afin que ces manœuvres soient exécutées sous l'effet de ces commandes. Cette programmation ressortira donc de l'exposé des commandes et de leurs effets qui va suivre.

25

Réglage du volume à prélever.

 Pour régler le volume à prélever, l'utilisateur clique sur la molette (c'est-à-dire la fait coulisser) puis fait tourner la molette pour choisir une des valeurs du volume qui s'affiche à l'écran. La rotation de la molette provoque

30 en effet l'incrémentation de la valeur de volume affichée et donc sa modification au cours du mouvement de la molette. Une fois que la valeur

souhaitée est atteinte, l'utilisateur clique à nouveau sur la molette, ce qui entraîne la sélection de cette valeur et le verrouillage de la pipette avec cette valeur de volume.

5

Navigation dans les menus.

Lorsqu'un menu présentant des éléments (par exemple plusieurs actions à accomplir) est affiché sur l'écran, l'utilisateur peut déplacer un curseur de l'un à l'autre des éléments du menu en faisant tourner la molette. L'utilisateur peut sélectionner un élément choisi par un clic sur la molette.

10

Entrée de mots, de chiffres, et d'expressions.

La molette permet d'entrer dans la pipette des mots (tels que des noms) des nombres, ou encore des expressions alphanumériques mélangeant lettres et chiffres. Ainsi, l'utilisateur est en mesure de personnaliser la pipette en entrant son nom, le nom de son service, ou toute autre information. Les caractères utilisables sont par exemple l'intégralité de l'alphabet de A à Z, les chiffres 0 à 9, « / », l'espace, ou « * ». Le caractère « * » permet par exemple d'indiquer au processeur que le dernier caractère est entré. Chacun des digits est défini successivement. Un caractère est sélectionné pour chaque digit par rotation de la molette, ce qui fait défiler des caractères, des chiffres, ou d'autres signes sur l'écran, puis est validé par un clic. Cela engendre également l'activation du digit suivant pour l'insertion d'un nouveau caractère.

15

20

25

Réglage du nombre de cycles avant maintenance.

Lorsque ce mode est activé, une valeur de nombre de cycles s'affiche sur l'écran. L'utilisateur fait tourner la molette pour définir le nombre de cycles de prélèvement avant la prochaine opération de maintenance. Lorsque la valeur souhaitée est affichée, l'utilisateur clique pour la sélectionner. Lorsque le nombre de cycles ainsi défini aura été effectué avec la pipette, le processeur déclenchera l'apparition d'un écran prédéterminé

30

indiquant qu'une maintenance doit avoir lieu. De même, l'utilisateur peut de la même façon régler un nombre de semaines jusqu'à la prochaine maintenance lorsqu'il est dans le mode le permettant. Lorsque le nombre de semaines ainsi défini sera atteint, le processeur déclenchera l'affichage d'un message prédéterminé sur l'écran.

Réglage de la date de maintenance.

La molette permet également de la même façon de régler et de valider la date de la prochaine maintenance en faisant défiler des dates sur l'écran et en sélectionnant la date souhaitée. Une fois arrivée la date sélectionnée, le processeur déclenchera l'affichage d'un message prédéterminé sur l'écran. Lorsqu'un tel message d'alarme est affiché, un clic sur la molette permettra de supprimer l'affichage de ce message.

Calibration.

La molette permet d'effectuer une calibration personnalisée de la pipette. On suppose par exemple que l'utilisateur a réglé la pipette au volume de prélèvement minimum. Il effectue un prélèvement avec ce volume et mesure le volume qui a été effectivement prélevé à cette occasion. Il est possible que ce volume soit légèrement différent du volume nominal qui avait été programmé. Le processeur est programmé pour tenir compte de ce décalage dans l'affichage d'un volume courant à prélever. Pour entrer la valeur mesurée, l'utilisateur, dans le mode de calibration, déverrouille le réglage de la valeur par un clic sur la molette, fait tourner la molette pour obtenir l'affichage de la valeur correspondant au volume effectivement mesuré, puis verrouille cette valeur de volume par un nouveau clic sur la molette.

Les mêmes opérations peuvent être effectuées par exemple avec la mesure du volume effectivement prélevé lorsque le volume de prélèvement correspond à 50% de la capacité de la pipette. De même, les mêmes opérations seront également effectuées lorsque le volume maximum a été

programmé. La connaissance de ces trois paires de valeur permet au processeur de calculer une table ou une courbe de correspondance entre une valeur de volume nominal quelconque et la valeur de volume corrigée à afficher sur l'écran. Cette correction est transparente pour l'utilisateur qui

5 croit seulement sélectionner à l'écran une valeur de volume. En fait, chaque position de la molette génère une valeur nominale qui est corrigée comme précité. C'est la valeur corrigée qui est affichée.

Un autre mode de calibration est envisageable qui est plus rapide que la calibration standard qui vient d'être décrite. Ainsi, pour une valeur de

10 volume quelconque, par exemple un volume fréquemment utilisé par l'utilisateur, l'utilisateur choisit tout d'abord le volume sur lequel il souhaite faire cette calibration. Pour cela, il clique sur la molette pour déverrouiller le réglage de la valeur lorsqu'il est dans le mode correspondant, règle la valeur

15 par rotation de la molette et en suivant l'évolution de la valeur sur l'écran, puis il verrouille le volume ainsi sélectionné par un clic sur la molette. Dans une deuxième étape, l'utilisateur, après avoir effectué un prélèvement avec la pipette, mesure le volume effectivement prélevé. Dans le mode correspondant, il entre dans la pipette la valeur ainsi mesurée. Pour cela, il clique sur la molette pour déverrouiller le réglage de la valeur, règle la valeur

20 par rotation de la molette, puis verrouille la valeur ainsi réglée par un clic sur la molette. Le processeur est programmé pour tenir compte du décalage entre ces deux valeurs en établissant un correctif ou une table de correspondance lors de l'affichage d'une autre valeur de volume quelconque.

25 Activation du générateur de sons.

La pipette peut être programmée pour émettre un signal sonore à chaque action sur un organe de commande. L'utilisateur peut choisir de supprimer ce signal. Pour cela, dans le menu correspondant, il clique sur la molette pour déverrouiller le réglage de cette fonction, fait tourner la molette

30 pour choisir l'élément « activé » ou « désactivé » et verrouille à nouveau la pipette par un clic sur la molette.

Réglage du contraste.

Le contraste de l'écran peut être réglé au moyen de la molette dans le mode correspondant par déverrouillage au moyen d'un clic, sélection de
5 valeur par rotation de la molette, et verrouillage par un nouveau clic.

Réglage d'un volume limite.

Cette fonction est utile lorsqu'on utilise avec la pipette des cônes de volume inférieur au volume maximal de la pipette. Il est en effet dans ce cas
10 nécessaire de prévoir une limite de volume inférieure à la limite nominale de la pipette. Le réglage du volume à prélever devra en effet être compris entre le volume minimum et le volume limite. Le réglage se fait une fois que l'on se trouve dans le mode correspondant par un clic sur la molette pour déverrouiller le réglage, le réglage de la valeur par rotation de la molette,
15 puis le verrouillage de la valeur réglée par un clic sur la molette.

Validation des choix.

Après le réglage de certaines valeurs (par exemple les volumes de calibration standard, les volumes de calibration en un point, ou les
20 paramètres de programmation de la maintenance), le processeur attend de l'utilisateur qu'il lui indique si ces réglages doivent être confirmés. Pour cela, l'utilisateur fait tourner la molette pour sélectionner dans le menu correspondant la fonction « quitter », un nouveau menu apparaît pour confirmer par « oui » ou par « non » ces choix. L'un de ces deux éléments
25 est sélectionné au moyen de la rotation de la molette puis est validé par un clic sur la molette.

Lorsque le message informant l'utilisateur qu'il faut accomplir une maintenance apparaît, l'utilisateur peut choisir d'entrer dans le menu de maintenance pour effectuer cette maintenance ou que cette maintenance lui
30 soit rappelée plus tard. Un clic sur la molette permet d'obtenir un menu de sélection de l'une des deux solutions. La rotation de la molette permet de

sélectionner l'une des solutions et un nouveau clic permet de valider cette sélection.

Mode prélèvement et mélange.

5

Dans le mode prélèvement et mélange, deux volumes de prélèvement sont à régler. Le premier est le volume à prélever, et le second est le volume de mélange. Les deux volumes peuvent être réglés dans le menu adapté au moyen de la molette, de la même façon qu'on l'a décrit pour le réglage d'un simple volume à prélever.

10

La pipette pourra être programmée de sorte que dans un mode fonctionnement, un prélèvement de liquide est simplement déclenché par l'action de l'utilisateur sur l'un des boutons et se poursuit lorsque ce bouton est relâché. A l'inverse, la pipette peut être programmée de sorte que dans

15

un mode d'utilisation le prélèvement est intégralement commandé par l'action du bouton, de sorte qu'il se poursuit tant que ce bouton est actionné, et cesse dès que le bouton est relâché par l'utilisateur.

20

Dans un mode de fonctionnement répétitif, le volume à prélever est réglé de la même manière que ci-dessus. Le nombre d'aliquotes est réglé également avec la molette. Après réglage du volume à prélever, c'est le nombre maximum d'aliquotes qui est affiché. Ce nombre peut être réduit par rotation de la molette puis validé par un clic.

25

Comme on le voit, la molette permet la sélection et le réglage de différentes fonctions de la pipette en permettant notamment par un clic une commande de sélection et par une rotation dans un premier sens une incrémentation d'une valeur d'un paramètre, et sa décrémentation par une rotation dans le sens opposé. Du point de vue de l'utilisateur, cette molette permet la navigation dans des menus ou le réglage de paramètres. La molette permet de minimiser le nombre de boutons présents sur la pipette. Elle améliore l'ergonomie de la pipette et la rapidité d'utilisation.

30

On a illustré à la figure 10 une variante de réalisation de la pipette selon l'invention constituée en l'espèce par une pipette 102 motorisée multicanaux.

La pipette comprend ici douze canaux 90 permettant d'effectuer douze prélèvements simultanés. La partie haute de la pipette est identique à celle de la pipette de la figure 1, seule est modifiée la partie basse. Il peut s'agir de la partie haute de la figure 1 à laquelle on a fixé de façon amovible la partie basse multicanaux en remplacement de la partie basse monocanal de la figure 1.

Bien entendu, on pourra apporter à l'invention de nombreuses modifications sans sortir du cadre de celle-ci. L'invention a été décrite en référence à une pipette motorisée, c'est-à-dire une pipette dans laquelle le prélèvement est commandé par un moteur. L'invention peut néanmoins être mise en œuvre avec une pipette dans laquelle le prélèvement est commandé directement par la main de l'utilisateur, et ce mécaniquement, sans l'intervention d'un moteur.

On pourra remplacer la molette mobile en rotation autour d'un axe par une boule mobile en rotation autour d'une infinité d'axes s'étendant dans un plan perpendiculaire à l'axe 82. La boule demeurera mobile à coulissement suivant la direction 82.

Comme on l'a vu, la pipette comprend des moyens pour déterminer une vitesse de rotation de la roue, et des moyens pour choisir une correspondance entre un secteur angulaire de la roue et une unité de valeur d'un paramètre dont le réglage s'effectue au moyen de cette roue. On pourra prévoir de mettre en œuvre cette caractéristique indépendamment du fait que la roue est montée coulissante.

Par ailleurs, on a décrit le programme enregistré dans la pipette en présentant les actions que devaient effectuer l'utilisateur pour commander la pipette. On pourra mettre en œuvre le programme correspondant indépendamment de la présence de la molette.

REVENDICATIONS

1. Pipette comportant une roue de commande (60) mobile à rotation et mobile à coulissement, caractérisée en ce qu'elle est agencée de sorte d'un coulissement de la roue engendre une commande de la pipette.

2. Pipette selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la roue (60) est mobile à coulissement suivant une direction (82) perpendiculaire à un axe (80) de rotation de la roue.

3. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la roue (60) s'étend en saillie d'un corps (4) de la pipette.

4. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la pipette comprend des moyens (90) de rappel de la roue à l'encontre de son coulissement à partir d'une position nominale.

5. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens (76, 78) pour convertir un mouvement de la roue (60) en au moins un signal électrique.

6. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens (76, 78) pour convertir un mouvement de la roue (60) en au moins deux signaux électriques permettant de déterminer un sens du mouvement.

7. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre une navigation au moyen de la roue (60) dans au moins un menu.

8. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue (60) au moins un paramètre, et de préférence au moins deux paramètres.

5

9. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens (50) pour déterminer une vitesse de rotation de la roue et des moyens (50) pour choisir une correspondance entre un secteur angulaire de la roue (60) et une unité de valeur d'un paramètre.

10

10. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue au moins un volume à prélever.

15

11. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue au moins une valeur de calibration de la pipette.

20

12. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre de régler au moyen de la roue un nombre de cycles de prélèvement précédant l'émission d'un signal par la pipette.

25

13. Pipette selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle est agencée pour permettre d'entrer dans la pipette au moyen de la roue des mots, des chiffres, ou des expressions alphanumériques.

30

14. Procédé de commande d'une pipette, caractérisé en ce qu'on commande la pipette en faisant coulisser une roue (60) mobile à rotation.

5 15. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'on fait coulisser la roue pour activer un mode de réglage d'un paramètre.


10 16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 14 à 15, caractérisé en ce qu'on fait tourner la roue pour sélectionner une valeur d'un paramètre.

17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 14 à 16, caractérisé en ce qu'on fait coulisser la roue pour valider une valeur d'un paramètre sélectionné.

15 18. Procédé selon l'une quelconque des revendications 14 à 17, caractérisé en ce que :

- durant une manœuvre de la roue (60), on détermine une vitesse de rotation de la roue ; et
 - on choisit une correspondance entre un secteur angulaire de
- 20 la roue et une unité de valeur du paramètre.

1/2

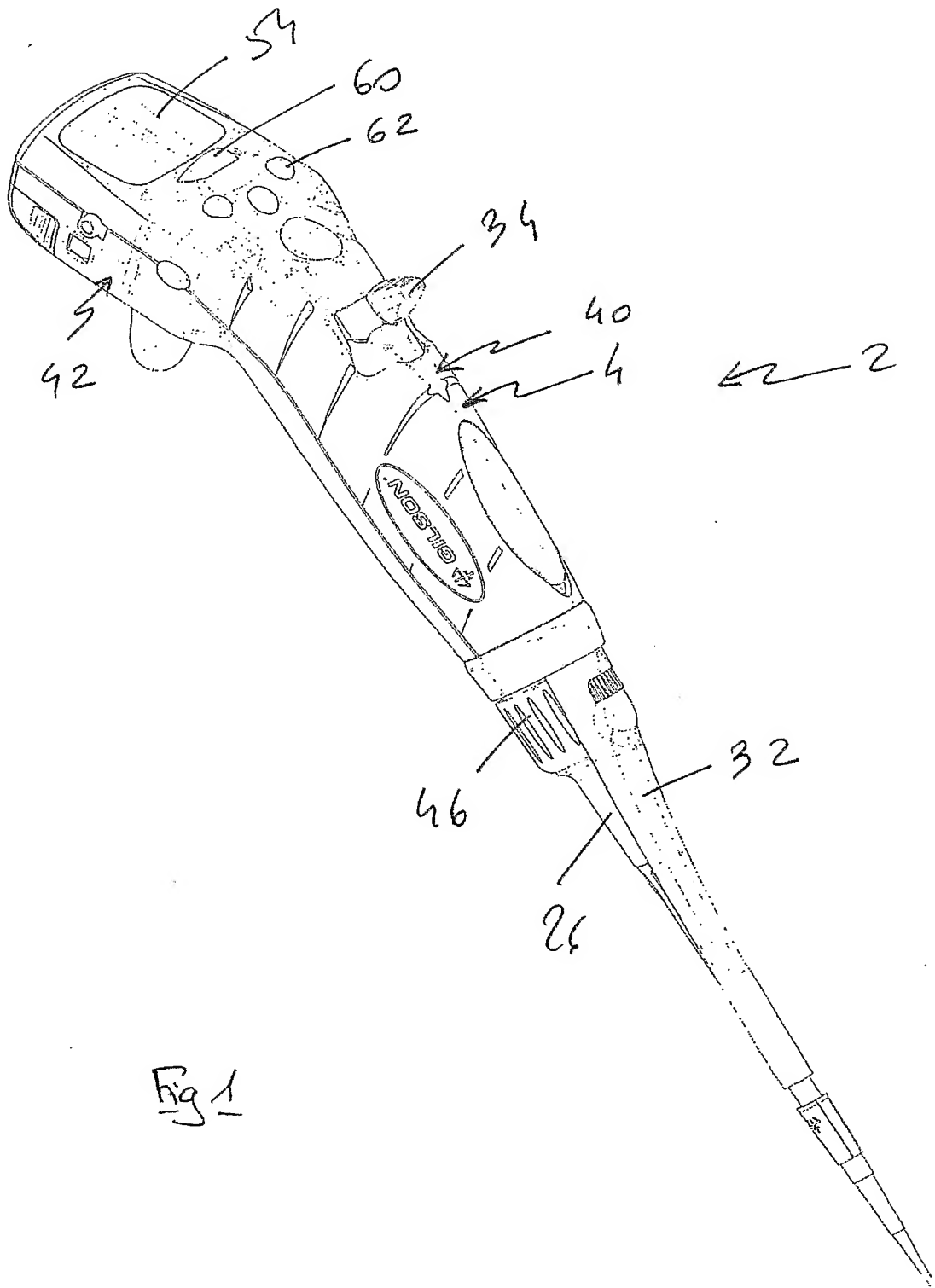




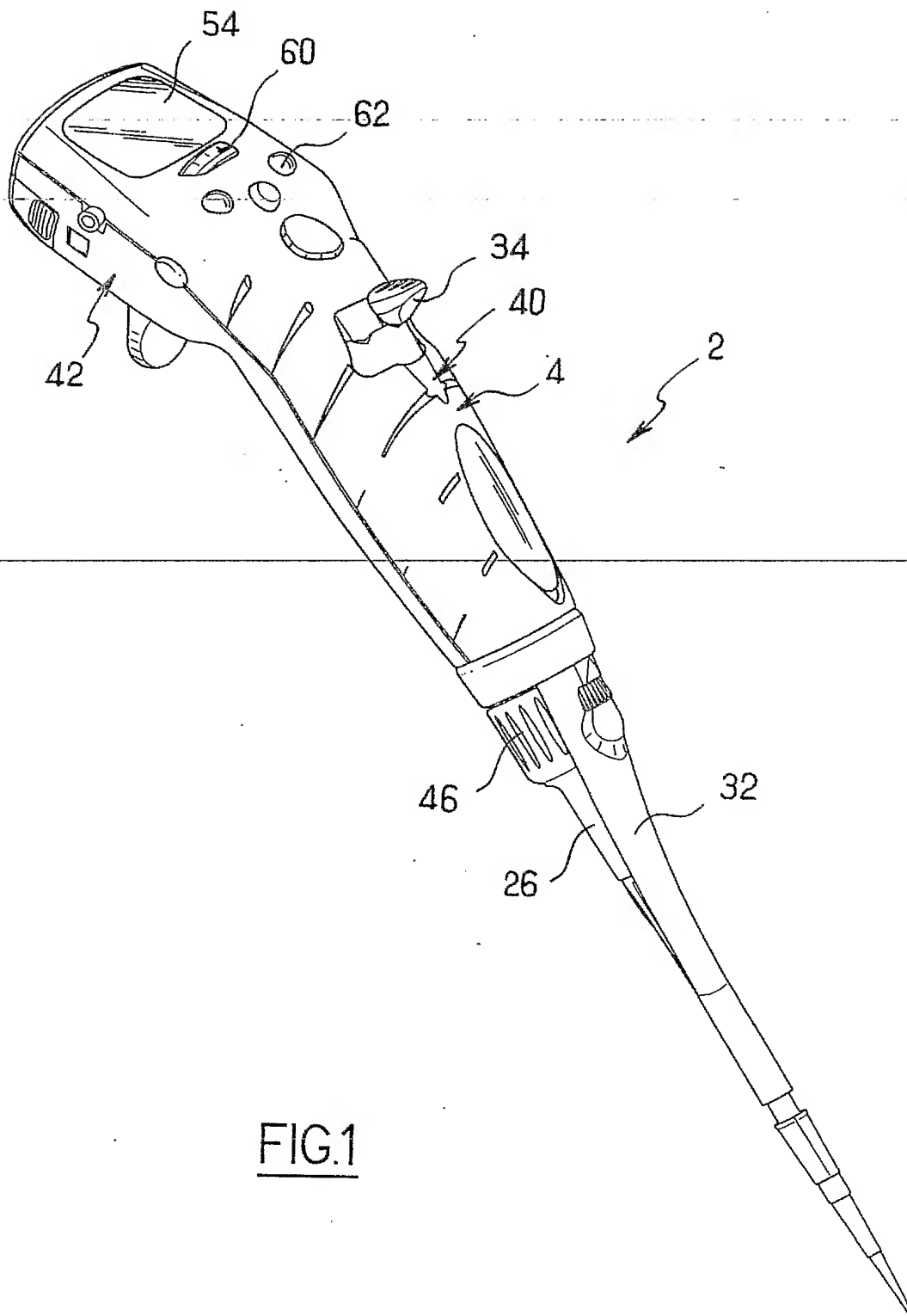


FIG.1

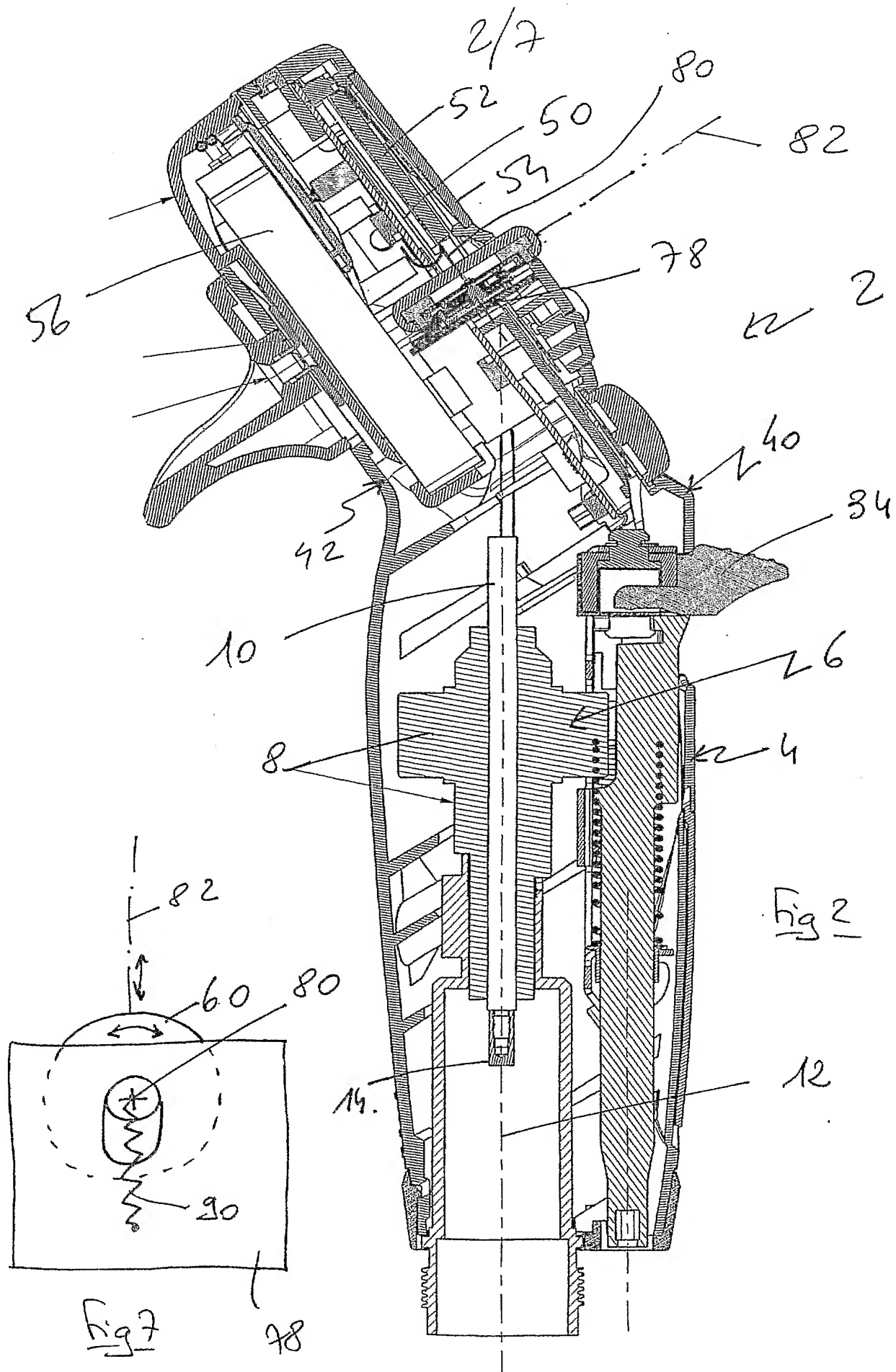

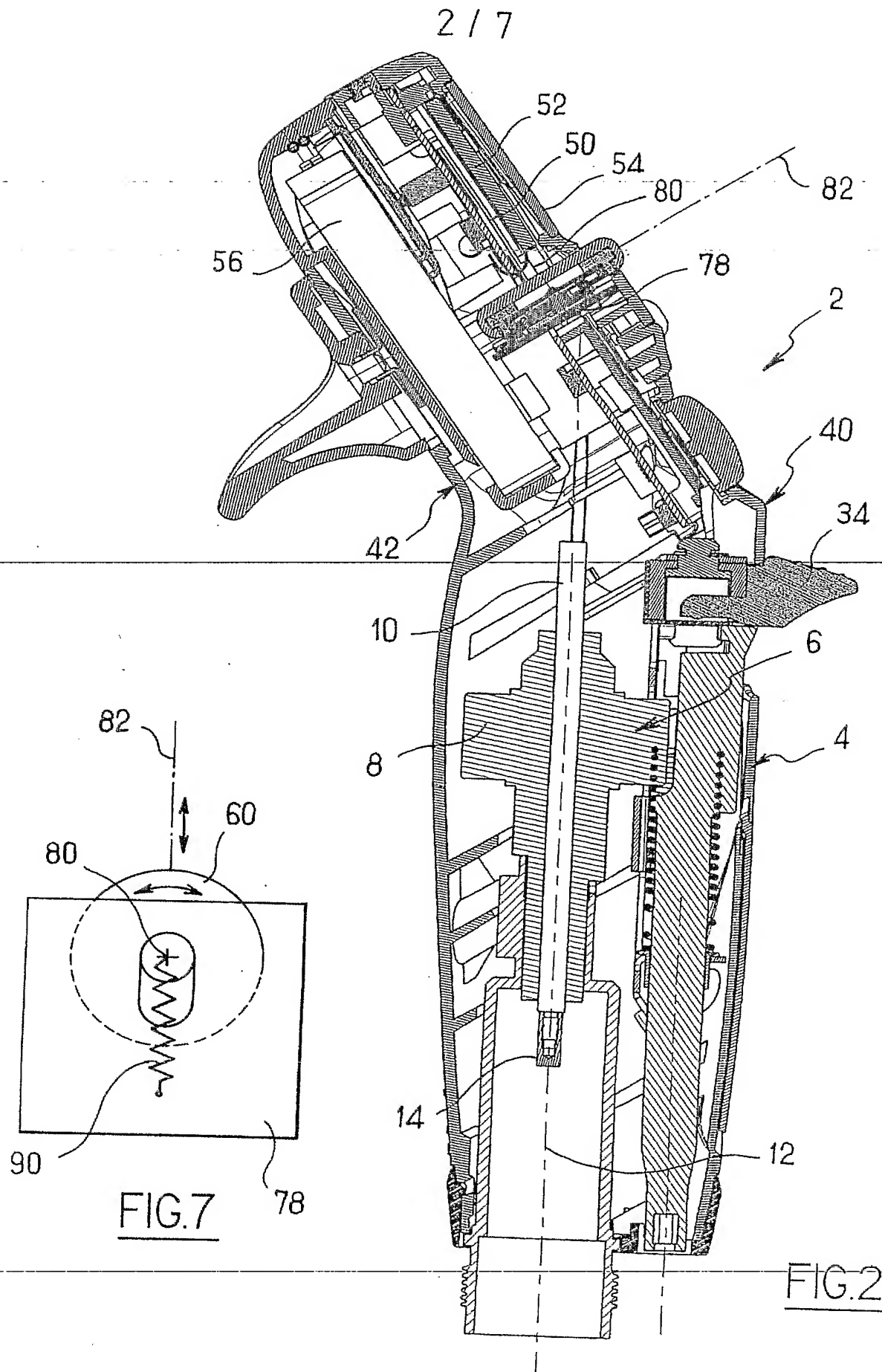

3/7

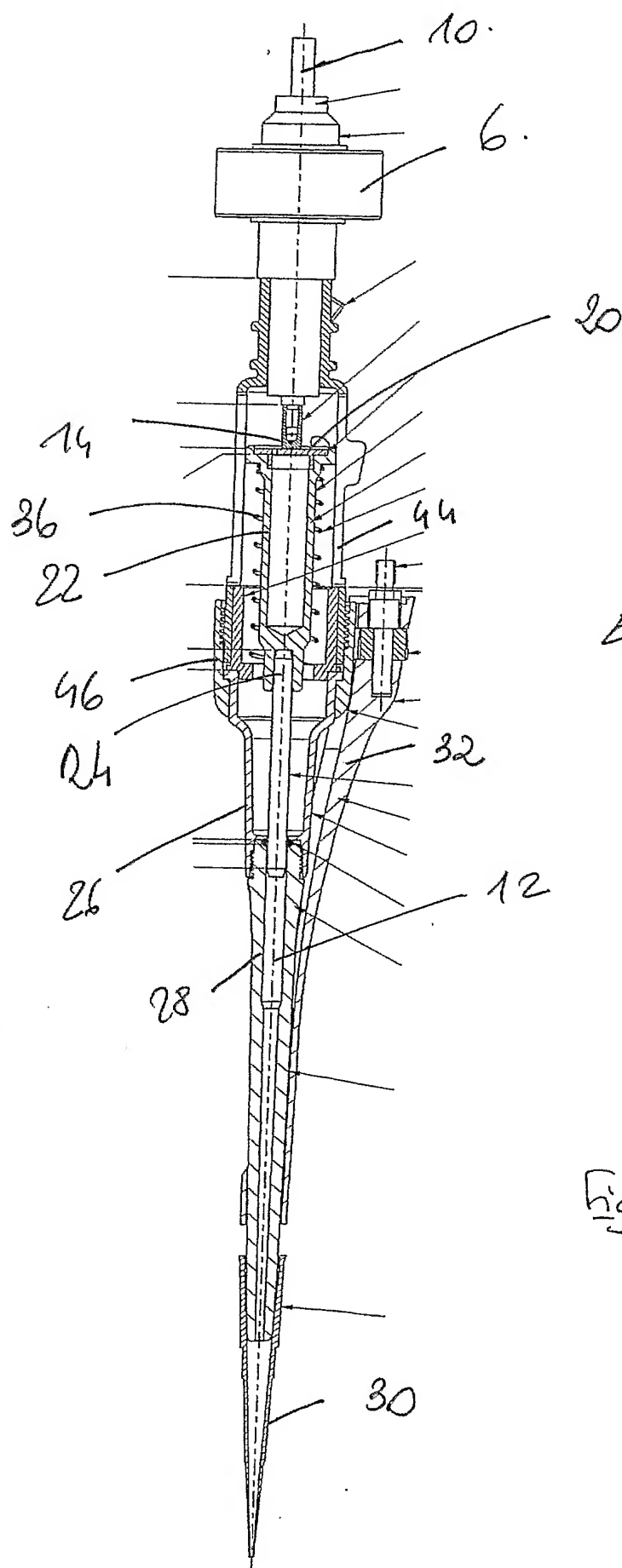

2 2

Fig 3.


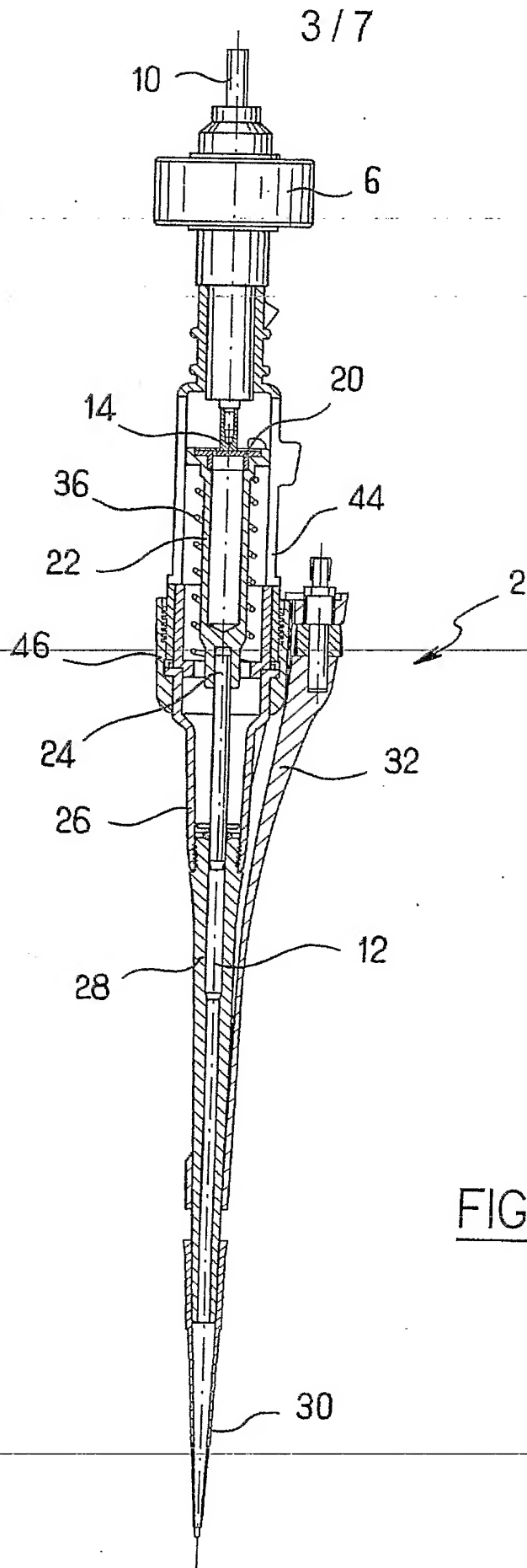


FIG.3

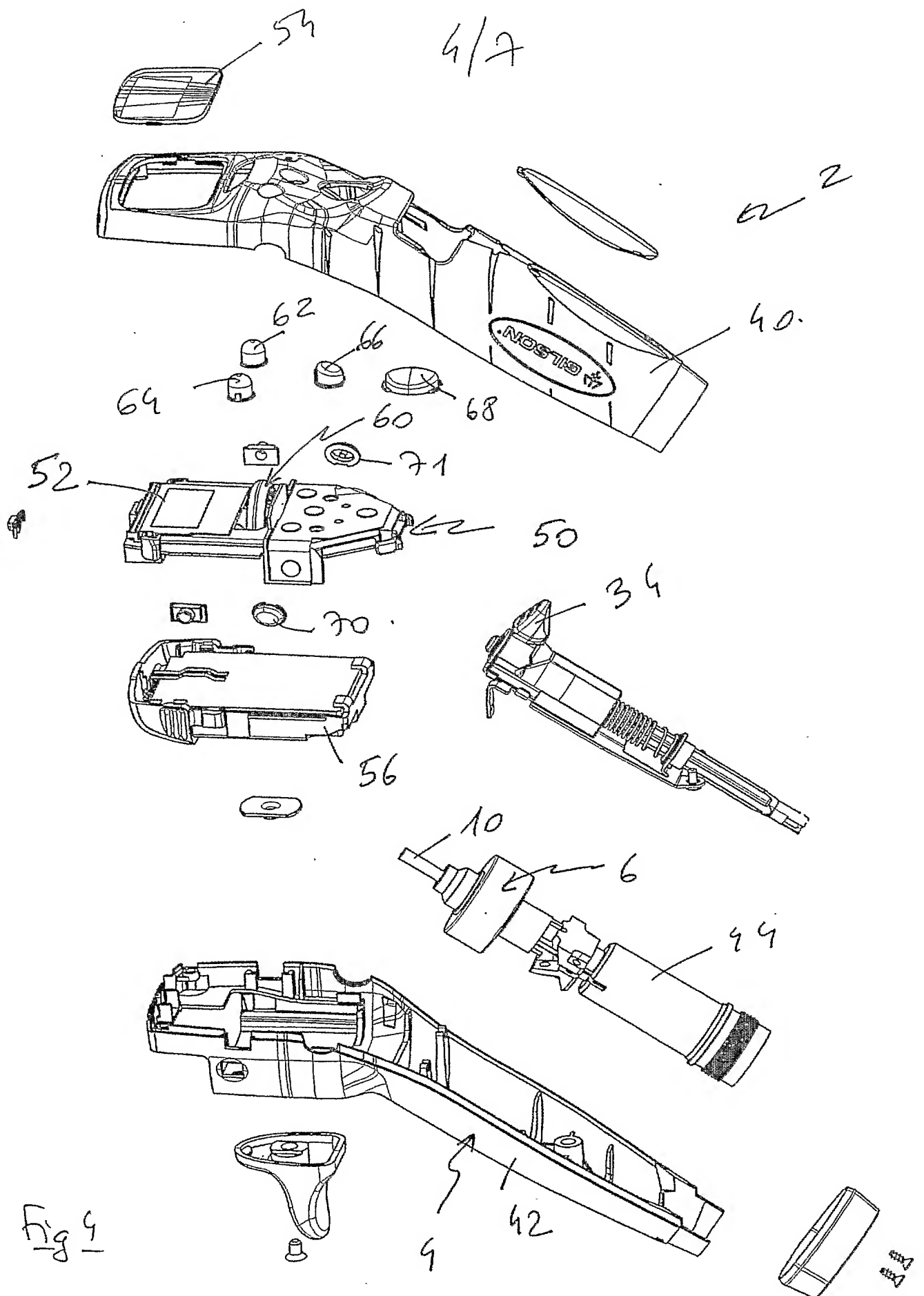

4 / 7




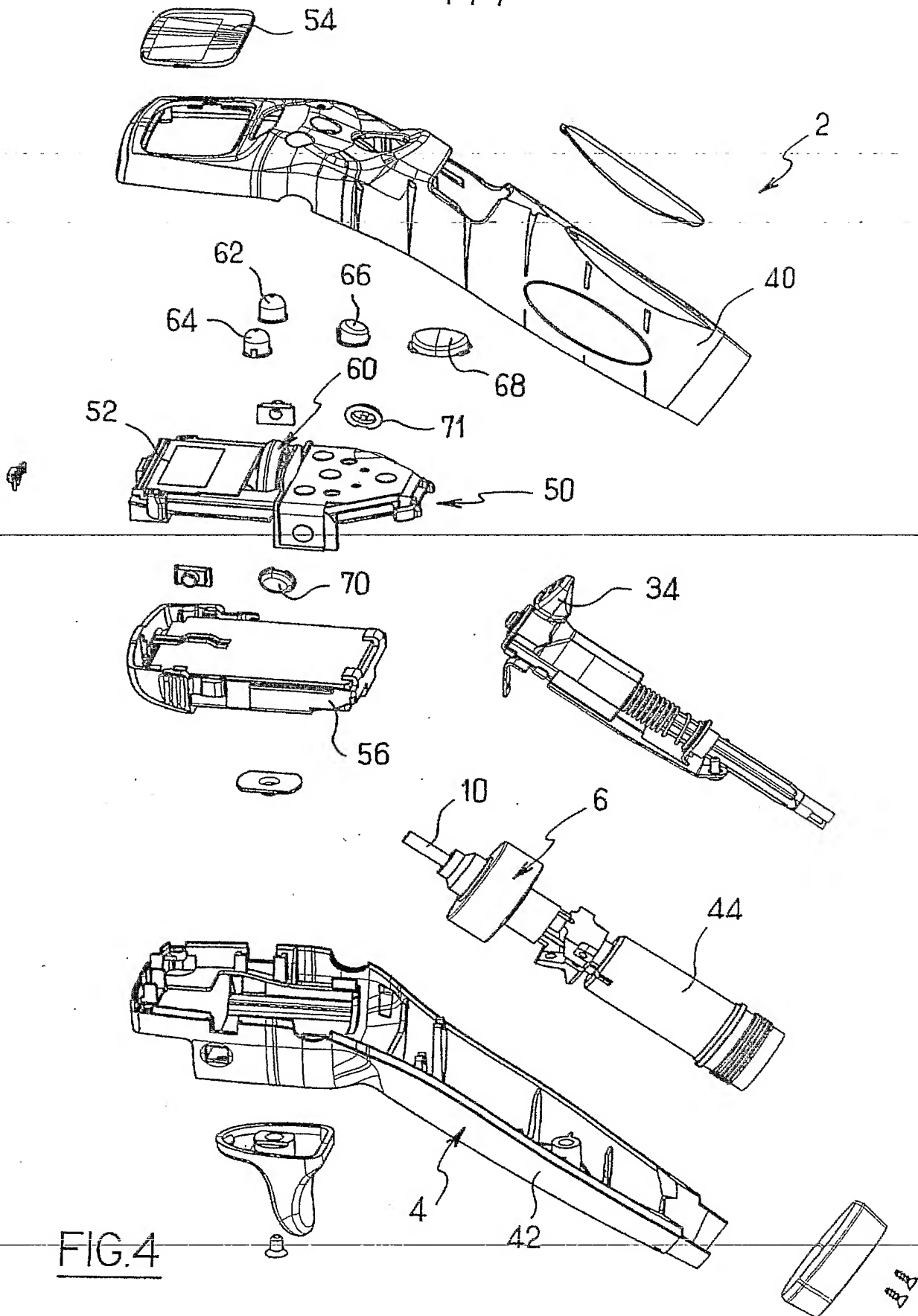


FIG. 4

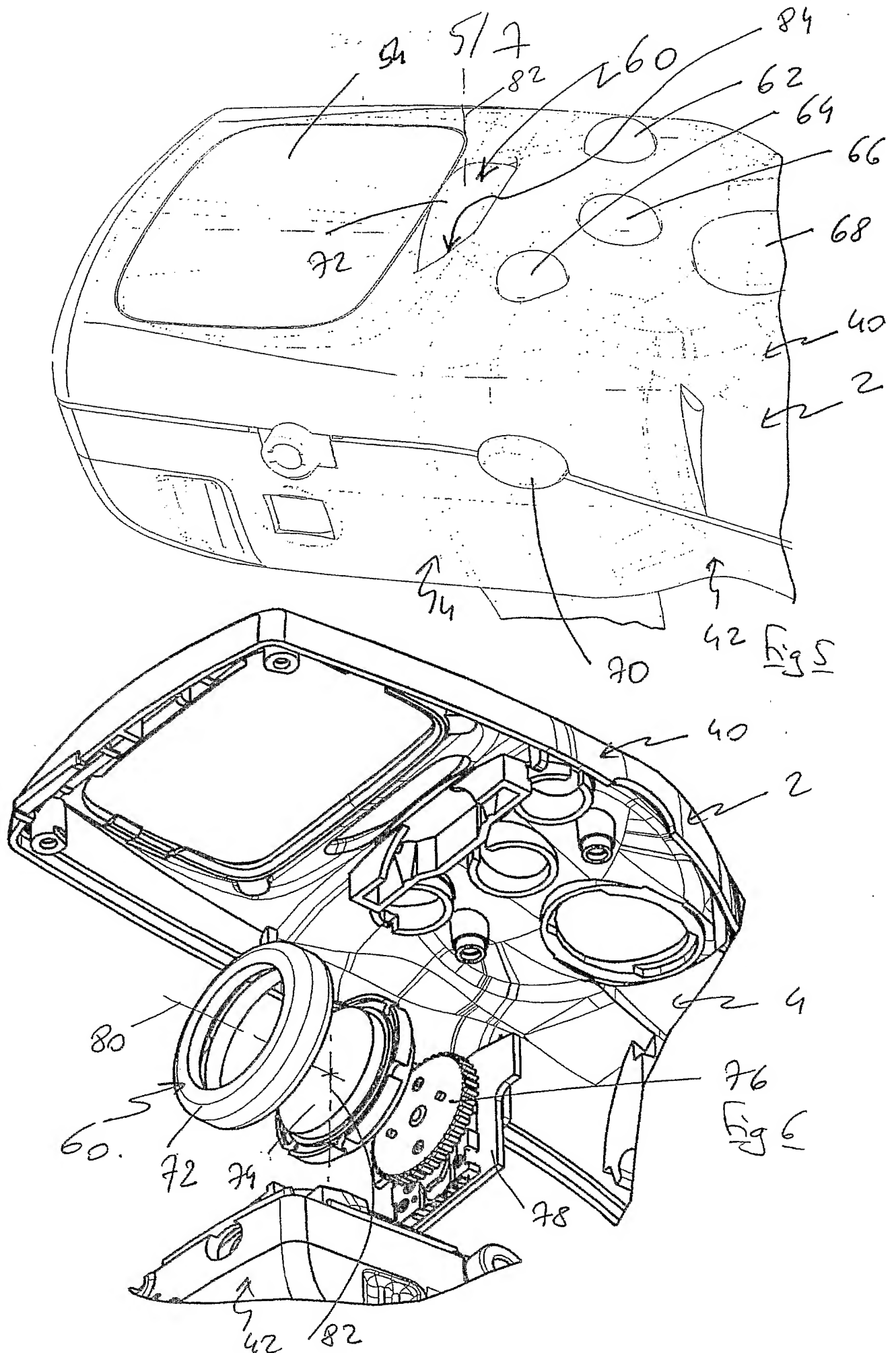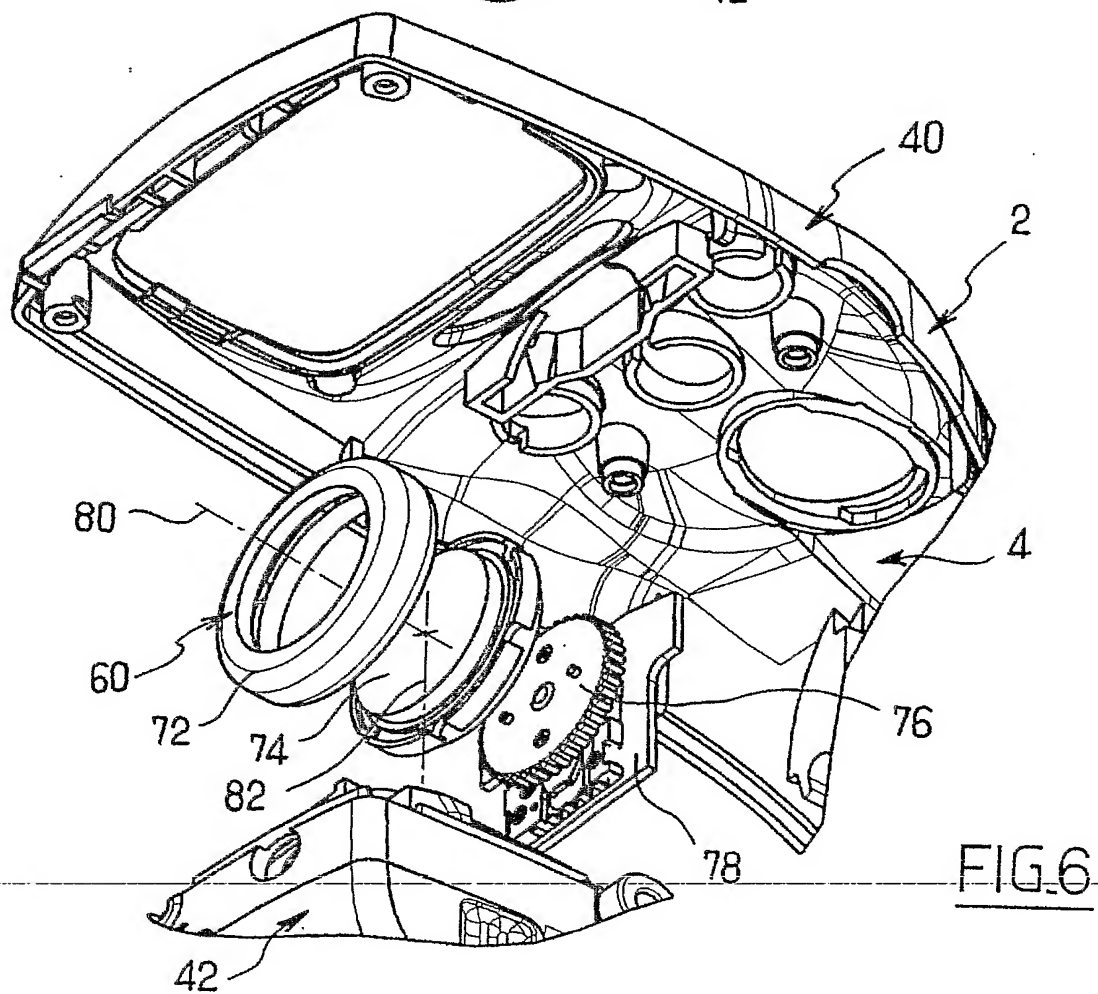

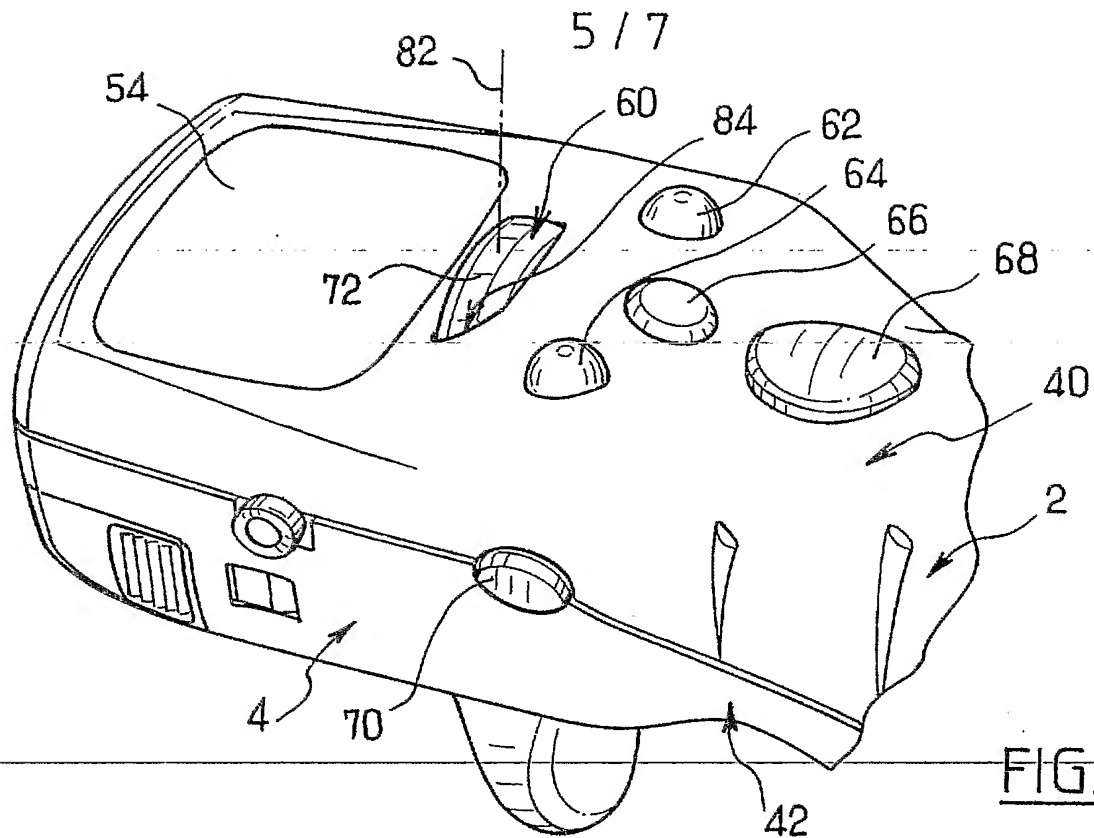

6/7

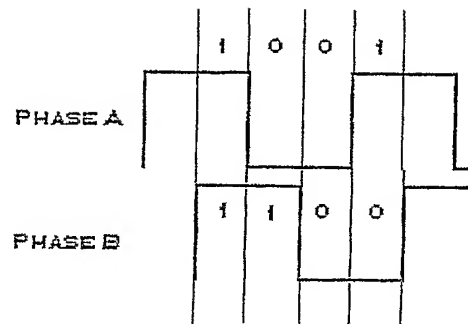


Fig 8

- Sens de rotation positif :


| Etat présent | | Etat suivant | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Phase A | Phase B | Phase A | Phase B |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

- Sens de rotation négatif :

| Etat présent | | Etat suivant | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Phase A | Phase B | Phase A | Phase B |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |

Fig 9

6/7

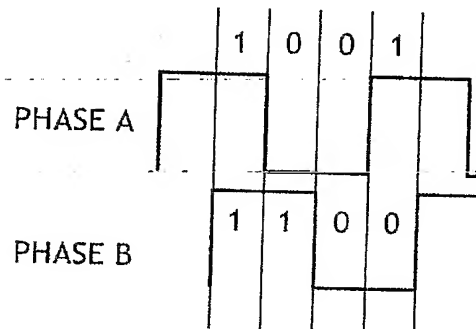FIG.8

● Sens de rotation positif :

| Etat présent | | Etat suivant | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Phase A | Phase B | Phase A | Phase B |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

● Sens de rotation négatif :

| Etat présent | | Etat suivant | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Phase A | Phase B | Phase A | Phase B |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |

FIG.9

7/7

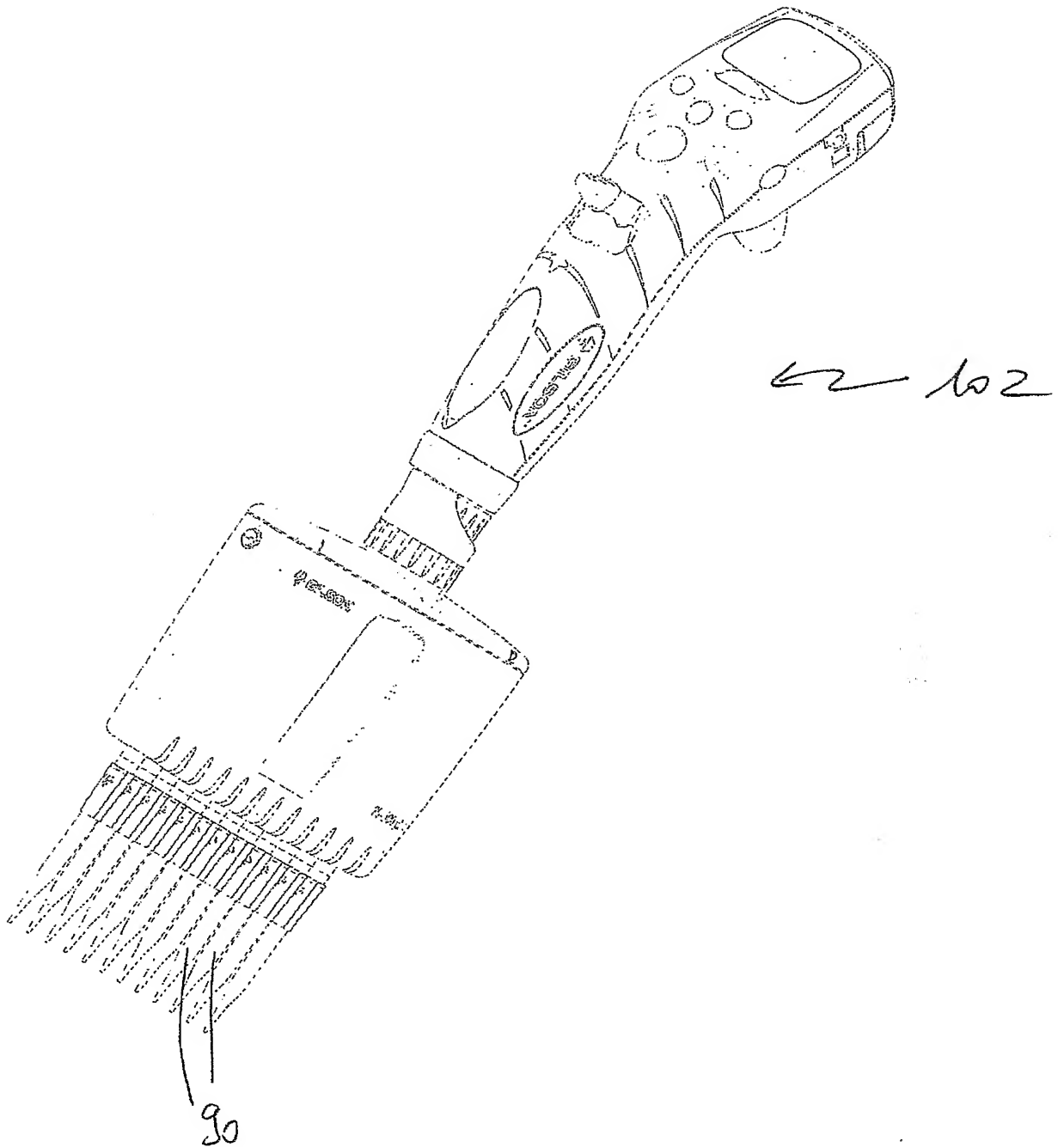


Fig 10

7 / 7

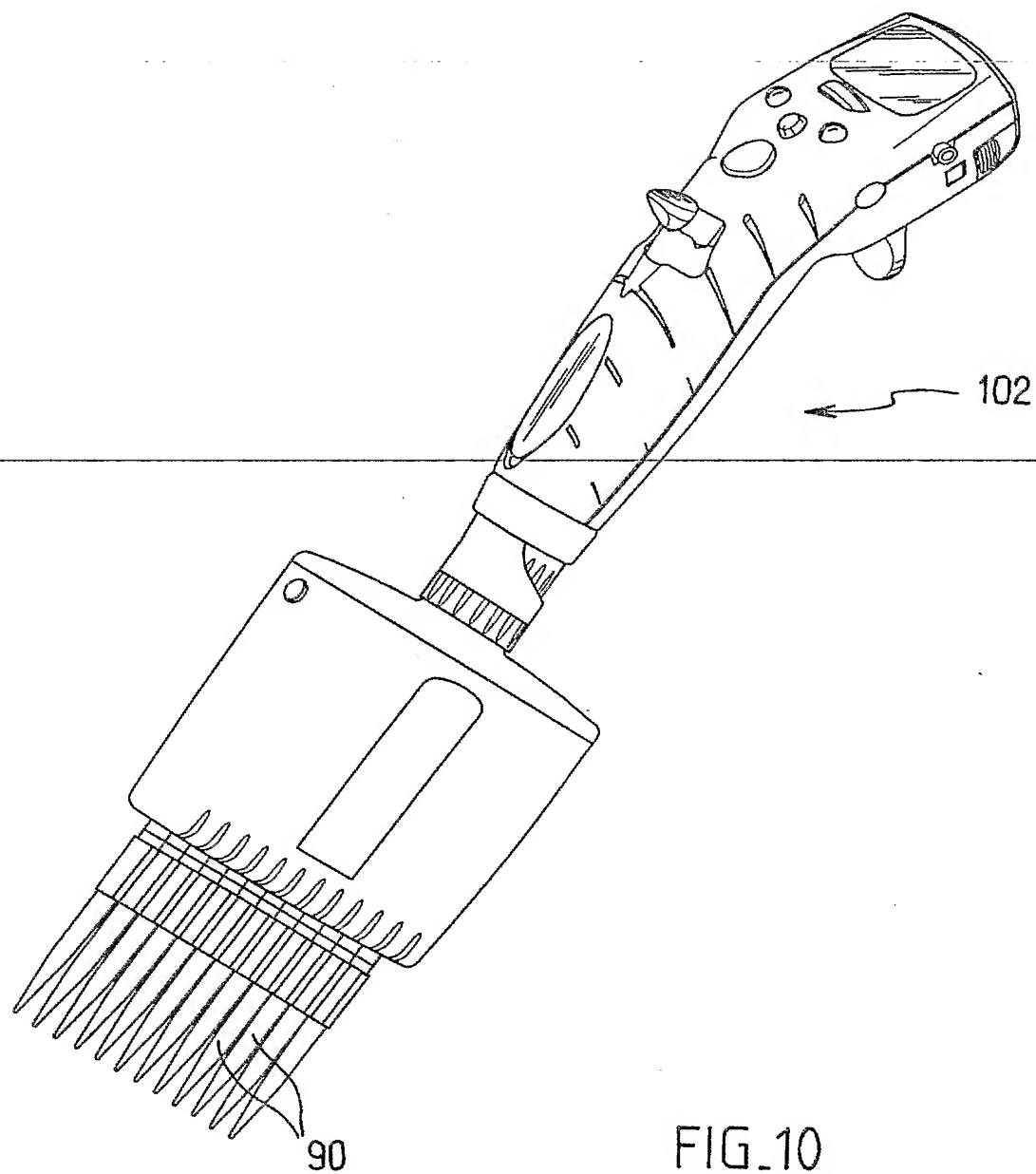


FIG.10



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI




N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1. / .1.**INV**

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113® W / 210103

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | | 241545 D22483 EMP | |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | | 040 9643 | |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) | | | |
| PIPETTE COMPORTANT UNE ROUE DE COMMANDE | | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : | | | |
| GILSON S.A.S : 19, avenue des Entrepreneurs, 95400 VILLIERS LE BEL - FRANCE | | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : | | | |
| 1 Nom | | HADDAD | |
| Prénoms | | Patrick | |
| Adresse | Rue | 17, Avenue Lamartine | |
| | Code postal et ville | 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY - FRANCE | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| 2 Nom | | LANGLAIS | |
| Prénoms | | Christian | |
| Adresse | Rue | 17 Grande Rue | |
| | Code postal et ville | 95460 EZANVILLE - FRANCE | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| 3 Nom | | SOLOTAREFF | |
| Prénoms | | Stéphane | |
| Adresse | Rue | 1, rue du Puits de la Ville | |
| | Code postal et ville | 95420 WY DIT JOLI VILLAGE - FRANCE | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | | |
| S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. | | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | | |
|  92169 | | | |

PCT/IB2004/003876

